

SafeDon™ Hygiensystem



Ett unikt dispensersystem som distribuerar handskar en och en

SafeDon™ Hygiensystem reducerar risken för smittspridning

SafeDon™ Hygiensystem för undersökningshandskar
är en ny effektiv lösning för att förhindra smittspridning.

Ett unikt hygiensystem som levererar handskarna individuellt
en och en med manschetten först.

Alltid rena
handskar!



Detta system är tillverkat för minsta möjliga beröring, vilket medför:

- En i taget - Hygiensystemet avger en handske åt gången ner till sista handsken.
Detta eliminerar beröring av dispenserns öppning, samt resterande handskar i förpackningen
- Handskarnas mest kritiska ytor - tummar, fingrar och handflator - vidrörs ej
- Systemet eliminerar oönskade handskar från att följa med ut vilket reducerar svinn
- Vägghållaren sparar värdefullt utrymme och håller handskarna borta från orena ytor
- När dispensern är placerad i vägghållaren behöver användarna aldrig mer vidröra dispensern
- Det förslutna systemet reducerar luftburen kontaminering på handskarna

SafeDon™ Nitrilhandske X-tra SDN-300-0X


SafeDon™ Nitrilhandske X-tra är en extra
tjock och hållbar undersökningshandske.

En handske med god komfort som ger ett bra grepp
med texturerade fingertoppar.

GL9665B



GL9666B

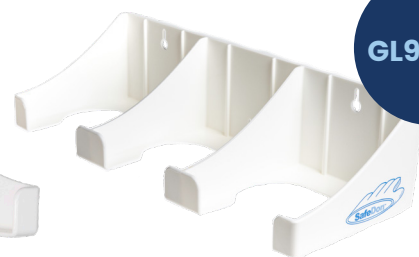

Artikelnummer	Beskrivning	Storlek	Handsk- längd	Avdelnings- förpackning	Transport- förpackning
SDN-300-01	SafeDon™ Hygiensystem Nitrilhandske Blå X-tra	XS	27 cm	200 st	1600 st
SDN-300-02	SafeDon™ Hygiensystem Nitrilhandske Blå X-tra	S	27 cm	200 st	1600 st
SDN-300-03	SafeDon™ Hygiensystem Nitrilhandske Blå X-tra	M	27 cm	200 st	1600 st
SDN-300-04	SafeDon™ Hygiensystem Nitrilhandske Blå X-tra	L	27 cm	200 st	1600 st
SDN-300-05	SafeDon™ Hygiensystem Nitrilhandske Blå X-tra	XL	27 cm	180 st	1440 st
GL9665B	SafeDon™ Hygiensystem Vägghållare för 1 dispenser	-	-	1 st	1 st
GL9666B	SafeDon™ Hygiensystem Vägghållare för 3 dispensers	-	-	1 st	1 st

SDN-300-0X



Produktinformation

Undersökningshandskar

Typ: Handskar, latex- och puderfria, osterila

Material: Acrylonitril - butadin

Färg: Blå (PMS 285 U)

Design: Microtexturerade fingertoppar och rullkant på manschetten

Emballage: 200 handskar per dispenser (180 XL)

Certifieringar

- Godkänt för medicinskt bruk
- Godkänt för livsmedelshantering
- I enlighet med förordningen (2022:1274)
- I enlighet med bestämmelserna i Förordning (EU) 2016/425
- MDR 2017/745 (CE Klass I)
- ISO 9001. ISO 13485, ISO 14001
- SA8000
- EN ISO 420:2003
- EN ISO 21420:2020
- EN ISO 374 (1-2)
- EN ISO 374 (4-5)
- EN 455 (1-4)
- EN ISO 15223-1:2021

Kvalitetssäkring

- US FDA Quality System Regulation (QSR)
- ISO9001 Quality System
- ISO13485 Quality Management System



Dimensioner

Artikelnummer	Storlek	Längd (mm)	Bredd (mm)
SDN-300-01	XS	270 min	≤80
SDN-300-02	S	270 min	80 ± 10
SDN-300-03	M	270 min	95 ± 10
SDN-300-04	L	270 min	110 ± 10
SDN-300-05	XL	270 min	≥110

Fysiska egenskaper

Parametrar	Före åldrandet	Efter åldrandet
Draghållfasthet (MPa)	14 min	14 min
Brottstyrka (N)	6 min	6 min

Tjocklek

Mätning av tjocklek	Enkel vägg (mm)
Fingrar (15 mm från toppen)	min. 0.11
Handflata (mitten av handflatan)	min. 0.08
Manschett (25 mm från manschettkanten)	min. 0.07

Kvalitetsinspektion

Kriterier	insp.level	AQL
Dimensioner	N=13	Median
Fysiska Egenskaper	N=13	Median
1000 ml Vattenläckagetest	G-1	1.0
Visuell Inspektion för Större Defekter	G-1	2.5
Visuell Inspektion för Mindre Defekter	G-1	4.0
Puderrester	N=5	N/A
Proteininnehåll	N=8	N/A