

AVOVA Sperling Reha

Maximal säkerhet med justerbart 5-punktsbälte och enkel ISOFIX-installation
– perfekt anpassad till varje steg i barnets tillväxt.

Flexibelt bälte för växande barn

AVOVA Sperling Reha gör det möjligt.
Ett säkerhetsbälte och placeringsbälte i ett som
kan användas från 76 cm till 135 cm utan
omställning. Från en kroppslängd på 100 cm
måste även 3-punktsbältet användas.

Enkel hantering från de första utflykterna upp till
skolåldern – alltid rätt stöd och skydd för barnet.
För konsekvent säkerhet och komfort.

Justerbar stol för optimal trygghet


Höjdbegränsaren på nackstödet visar när det är
dags att byta från säkerhetsbälte till placerings-
bälte vilket minskar risken för felaktig användning.
Exakt justering av kuddarna ger optimalt stöd för
barnets överkropp och främjar en bättre hållning.

Med AVOVA Sperling Reha har du en rad
justeringsmöjligheter som sväng- och lutningsbar
bas kan stolen anpassas perfekt och ge bekväma
vilolägen.







Laterala bålstöd är ett viktigt stöd för överkroppen och sidokuddar i sitsen stödjer låren.

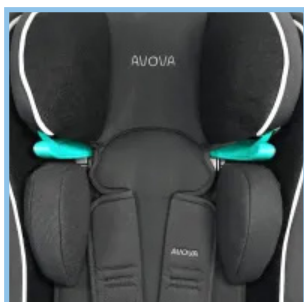

Kan justeras för att ge en mer bekväm passform genom interna fickor som möjliggör extra vaddering.

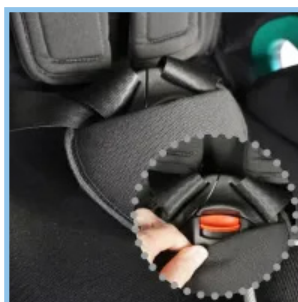

Fempunktsbältet håller överkroppen i korrekt position. Den lilla grenkudden täcker bältesspännet för att förhindra oavsiktlig öppning.

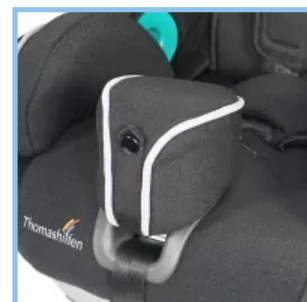

Den avtagbara abduktionsguiden ger en bra sittställning och förhindrar att benen faller inåt eller rullar över.

Mått & vikt	AVOVA Sperlina Reha
Sittdjup (till framkant)	350 mm
Sitsbredd	260 mm - 370 mm
Ryggstödshöjd (insidan av sitsen)	530 - 760 mm
Axelhöjd (bältesguide)	300 - 510 mm
Sitslutning (basmodell)	10°
Sitslutning (med tiltplatta)	2.5° / 5° / 7.5° / 10°
Totala mått (B x H x D)	430 x 630 x 470 mm
Sitsens vikt	13 kg
Användarens längd	76 - 135 cm
Maximal användarvikt	36 kg