

Hercules Small

Denna specialutvecklade rehabiliteringsbilbarnstol uppfyller inte bara gällande säkerhetsstandarder utan är även testad enligt den senaste R129-standarderna som tar hänsyn till både frontala och sidokollisioner.


Utvecklad för stöd i varje detalj

Hercules Small erbjuder mer än bara grundläggande funktioner. Den är utrustad med viktiga tillägg såsom sidokollisionsskydd, bäckenstöd, benstöd och huvudstöd. Var och en av dessa delar bidrar till att uppfylla strikta säkerhetsstandarder samtidigt som de ger barnet komfort och stöd.


Högre krav på skydd, ergonomi och material

R129-standarderna för bilbarnstolar lägger särskilt stor vikt vid ökat skydd vid sidokollisioner och ställer högre krav på bältesystemet samt förankringen av bilbarnstolen i fordonet. Utöver krocksäkerhet ställs även krav på användbarhet, ergonomi och material med låg skadlig påverkan vilka testas noggrant.




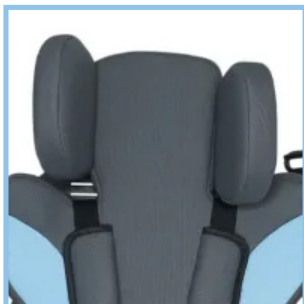

Kan justeras asynkront i både bredd och höjd. Med separata tillbehör kan den även justeras i djup vilket hjälper till att förebygga sensorisk överstimulering.

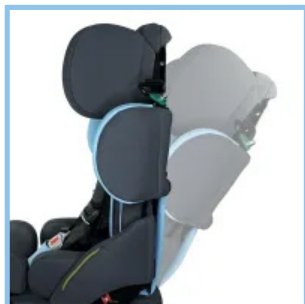

Kan steglöst justeras i ryggstödet med två snabbhandtag – helt utan verktyg: använd bara de röda snabbspännena.

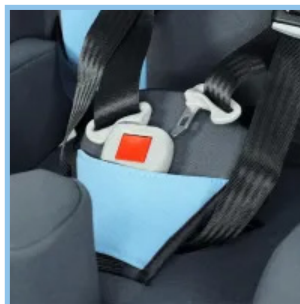

Axelremmarna kan fästas individuellt i snabbspännet vilket gör det enklare för föräldern eller medhjälparen att spärra fast barnet.



Steglöst justerbar upp till 8 cm för individuell anpassning till barnets tillväxt.

Mått & vikt	Hercules Small
Sittdjup	310 – 390 mm
Sittbredd	210 – 330 mm
Ryggstödshöjd (insidan av sätet)	570 – 800 mm
Ryggbredd (säte)	450 mm
Huvudhöjd (säte – nedre kant på huvudstödet) (min. ryggstödshöjd) (max. ryggstödshöjd)	335 – 365 mm 570 – 600 mm
Huvudbredd	115 – 200 mm
Axelhöjd (bältesguide)	330 – 600 mm
Axelbredd	450 mm
Axelbredd med axelvaddering	345 mm
Bäckenbredd	230 – 350 mm
Knäbredd	230 – 360 mm
Ryggvinkel (max.)	90° - 145°
Sittlutning (basmodell)	0°
Sittlutning (med tiltplatta 10°)	0° / 2,5° / 5° / 7,5° / 10°
Sittlutning (med tiltplatta 20°)	10° / 12,5° / 15° / 17,5° / 20°
Underbenslängd (med fotstöd)	160 – 420 mm
Höjd sidostöd för bål (övre kant)	280 – 340 mm
Avstånd sidostöd för bål	200 – 330 mm
Armstödshöjd (övre kant)	155 – 310 mm
Armstödens bredd	240 – 350 mm
Underarmsstöd (övre kant)	195 – 300 mm
Urtag för underarmsstöd (djup)	110 – 230 mm
Urtag för underarmsstöd (bredd)	300 mm
Abduktionsblock (B x H x D)	70 x 100 x 100 mm
Max. totala mått (B x H x D)	550 x 850 x 340 mm
Min. hopfällda mått (B x H x D)	550 x 230 x 600 mm
Vikt på stolen (basmodell)	11,6 kg
Användarens längd	100 – 150 cm
Användarens vikt	18.1 – 50 kg