

Netti Smart

För rullstolsanvändare med höga komfortkrav. Flera skumskikt ger ökad sittkomfort medan ergonomiskt länd- och 120 mm sidostöd ger bra stöd. Sittbredd från 250 till 600 mm

Hög komfort och steglös höjdjustering

Netti Smart är en flerskiktad konstruerad PU dyna med 120 mm sidostöd. Ryggstödshöjd finns i 500 eller 600 mm. Ryggstödshöjd 400 mm till Netti S (svart eller svart/röd). Avsedd användning är i rullstolar och sittsystem.

Flikarna på baksidan öppnas och dynan fästes med kardborrband för att förhindra att den ändrar läge. En integrerad förvaringsväska ingår och den nedre fliken kan fällas ner för att täcka glipan mellan rygg- och sittdynan.



Individuell höjd kan ställas in steglöst

Den är steglöst justerbar i höjdlid. Ryggdynan lyfts från sittdynan så att svankstödet är i nivå med ländryggen. Se till att det finns utrymme för användarens höft och bakdel. Kom ihåg att ställa in rullstolens kardborreband till den enskilde användaren.

Uppbyggnad av ryggdyna

- Rundade hörn för mer rörelsefrihet i arm- och axelområdet
- 120 mm sidostöd för mer stabilitet
- Ergonomiskt stöd för överkroppen
- Gott om utrymme för höfterna för att säkerställa en stabil sittställning
- Flera skumskikt möjliggör snabbare nedsjunkning



Individuell höjd kan ställas in steglöst


På baksidan av ryggstödet finns ett mätsystem med sex halvmånar. Detta gör att dynan kan placeras korrekt och enkelt av en medhjälpare när dynan t.ex. tagits bort för tvätt.



Olika överdrag


3D

Andningsbart, elastiskt och slitstarkt. 3D-nätstrukturen förbättrar mikroklimatet, ventilerar och minskar värmeuppbbyggnaden. Detta stärker huden och den underliggande vävnadens motstånd mot inre och yttre påverkan såsom tryck och skjuvning. 100% PES (polyester).

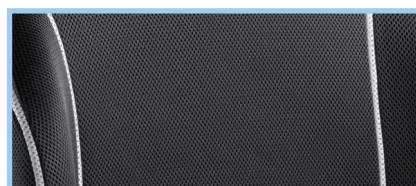

EASY CARE

Slitstark, andningsbart, elastiskt samt torkbar och hygienisk. PES (Polyester) + PU.

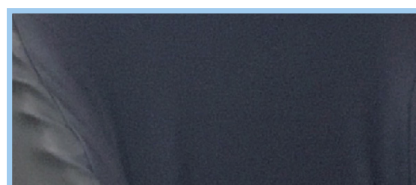

Sitbredd	250 mm	300 mm	350 mm	350 - 600 mm
Höjd	400 mm	400 mm	400 mm	500 - 600 mm