

THOMASHILFEN Octopus

Rehabiliteringsbältesystemet för barn, ungdomar och vuxna.
Optimal positionering för maximal säkerhet i bilen.

Utvecklad för växande behov och ökat stöd

Bältesystemet erbjuder en säker och bekväm lösning för positionering av barn till vuxna i fordonet. Tack vare sin genomtänkta design säkerställer det en upprätt sittställning och optimalt stöd i fordonet.

Med individuellt justerbara selar och ett andningsbart överdrag ger Octopus maximal komfort samtidigt som den förhindrar oavsiktlig uppknäppning och möjliggör säker rörlighet. Idealiskt för vardagen och transport i bil.

Säkerhetsinformation

Octopus rehabiliteringsseselsystem är inte klassificerat som en säkerhetssele utan som en medicinteknisk produkt för positionering. För att uppfylla säkerhetsföreskrifter måste fordonets befintliga säkerhetsselen ALLTID användas ovanpå Octopus-selen. Denna kombination ger extra säkerhet för användaren.


Särskilt lämplig för:

- Muskulära funktionsnedsättningar / postural instabilitet
- Låg muskeltonus
- Hyperaktivitet / hög motorisk aktivitet
- Perceptionsstörningar / autism
- Intellectuell funktionsnedsättning
- Fetma





7-punkts sittväst ger sittkomfort och optimalt stöd för en upprätt positionering av överkroppen.

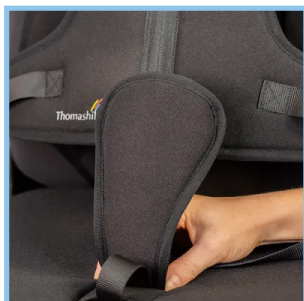


Grenremmen förhindrar att användaren glider framåt och ur position samt säkerställer en god bäckenposition. Kan tas bort vid behov.




Kan användas med nästan alla fordonsstolar – inklusive enskilda säten, bänksäten och bälteskuddar.



Sju låsbara bälteslås ger ännu mer säkerhet och förhindrar att bältet öppnas av användaren

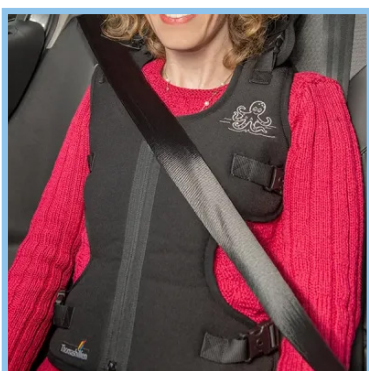

OBS:
Använd ALLTID THOMASHILFEN Octopus tillsammans med fordonets 3-punkts säkerhetsbälte.

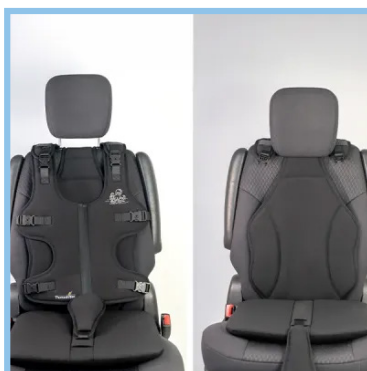

Snabba fordonsbyten: basryggdelarna förblir monterade i bilarna. Endast 7-punkts sittvästen följer med användaren vid byte av fordon.



Vid en olycka kan de låsta bältena snabbt skäras av med den medföljande bälteskniven.

Mått & vikt	Octopus S	Octopus M
Klädsel 7-punkts sittväst (B x H)	330 x 410 mm	420 x 420 mm
Basryggkudde (B x H)	370 x 820 mm	370 x 820 mm
Användarlängd	130 - 160 cm	150 - 190 cm
Användarens kroppsvikt	30 - 50 kg	50 - 80 kg