


Netti Dynamic IQ

Elrullstol med dynamiska funktioner. Denna elrullstol möjliggör extra rörlighet för användare med starka spasmer och ofrivilliga rörelser tack vare Nettis dynamiska sittenhets monterat på elrullstolschassit från TA.

Dynamiska funktioner

- Höftvinkel
- Benlängd
- Knäinkel
- Fotvinkel
- Sits
- Nacke

ISO 7176-19
Godkänd som
säte i bil

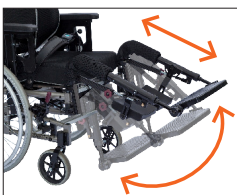


Fjädrande benstöd följer benets rörelser och återgår smidigt till utgångsläget. De anpassar sig efter knäledens extension och fotens rörelser.



Stolsryggen flexar bakåt vid rörelser i användarens rygg tack vare gascylindrar i stolsryggen och för kroppen tillbaka till rätt utgångsposition.



Sittenhetsen höjer sig när användaren går upp i ett streckmönster, där höften rör sig uppåt och framåt. Detta förhindrar att användaren glider framåt under spasmen.

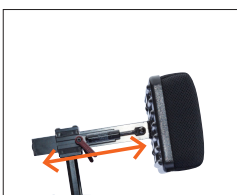

Vi erbjuder ett dynamiskt huvudstöd som absorberar rörelserna från nacken.




Fördelar med Netti Dynamic IQ

- Rullstolen följer användarens rörelsemönster
- Mindre obehag vid spasmer
- Bättre postural kontroll
- Reducerar möjligheten att glida ur stolen
- Bidrar till färre repositioneringar för användaren
- Bättre välbefinnande för användaren
- Bibehåller en god positionering över tid
- Välj mellan FWD - framhjulsdriven eller MWD - mitthjulsdriven elrullstol

Beskrivning			
Sittbredd	350 / 380 / 400 / 430 / 450 / 500 mm	Belysning	Ingår
Sittdjup	400 – 500 mm	Total bredd	630 mm
Sitthöjd	445 mm med 14" hjul	Totallängd	ca 130 mm
Sitslyft	300 mm	Max användarvikt	135 kg
Eltit	45°	Svängradie	650 mm
Ryggvinkel	86° - 133°	Hindertagning	100 mm
Motor	2 x 350 Watt	Markfrigång	70 mm
Batterier	2 x 80 Ah	Hastighet	6 km/h
Elektronik	R-NET 120 A		

Välj mellan olika styrsätt

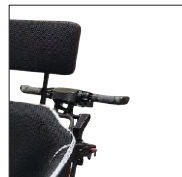

Scoot control från Mo-vis
God ergonomisk, intuitiv styrning. Du styr enkelt genom att vrida styret åt höger/vänster.



Vårdarstyrning sk Z-styrning
Enkel intuitiv styrning vars handtag trycks ner för att köra framåt och lyfts uppåt för att backa.