

Netti 4U CEDS

Netti 4U CEDS har marknadens minsta totalbredd (bara 180 mm större än sittbredden) och en låg totalvikt. Rullstolen passar därför särskilt bra på platser där det är ont om plats och i smala dörröppningar. Den låga vikten och det hopfällbara chassit gör rullstolen lätt att transportera. Stolen är ergonomisk och användarvänlig.

Ergonomisk körbygel

Körbygeln är ergonomiskt utformad så att ledsagaren enkelt kan nå användaren. Den kan snabbt och enkelt justeras i höjdlöd och därmed anpassas efter ledsagarens längd.

Kort sittdjup möjligt

Kort sittdjup på 375 mm möjligt för kortare personer. Sittdjupet kan justeras med 75 mm på alla stolar utan att några komponenter behöver bytas ut.

Flexibelt sittdjup

Med en Netti 4U CEDS är det enkelt att reglera sittdjupet. Stolen kan djupjusteras med 75 mm genom att ryggrören flyttas. Netti 4U CEDS har ett sittdjup från 375 till 450 mm. Justering av benstödsfästet är också möjligt. Genom att montera en sittplatteförlängare finns möjligheten till ytterligare 50 mm sittdjup.

Benstöd, valbart

- Vinkelfasta eller manuellt vinkelställbara benstöd
- Hel fotbräda
- Delade fotplattor upp till SB 430 mm

Huvudstöd

Stort utbud av flexibla och starka huvudstöd

**COMPACT
EASY-TO-USE
DESIGN
SHORT**



Beskrivning		
Sittbredd	350 / 400 / 430 mm	
Sittdjup	375 – 450 mm	Går att få upp till 500 mm med sittplatteförlängare
Rygghöjd	500 (600 mm ²⁾)	²⁾ Med ryggförhöjningskit
Sitthöjd	465 - 500 mm (440 mm)	
Tilt	-5° - +20°	
Rygg	90° - 133°	
Användarvikt	130 kg	
Vikt	30 - 32 kg	
Krocktestad	Max. 130 kg	

Netti 4U CEDS




Flexibelt armstöd

Armstöden kan fällas upp när de inte används, vilket underlättar vid transport. Armstödsplattan kan enkelt justeras framåt eller bakåt till önskat läge och anpassas efter om användaren sitter i stolen, sitter vid ett bord eller ska ta sig ur stolen.



Finns även i dynamiskt utförande

Med Netti Dynamic systemet förvandlas Netti 4U CEDS till den perfekta rullstolen för användare med extensionsrörelser. Rullstolen anpassar sig efter användaren som utsätts för lägre tryckbelastning under spasmer eller sammandragningar. Ryggstödet, sitsen samt vid behov även huvudstödet och fotstöden absorberar användarens extensionsrörelser.

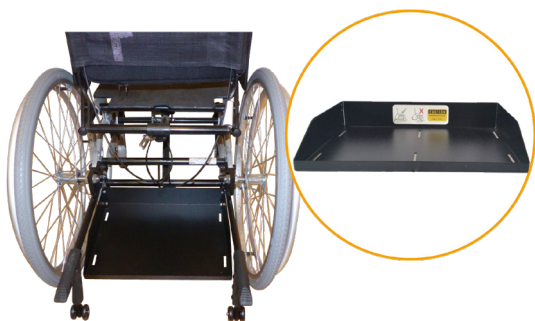

Universalkorg

Många användningsområden, t.ex. till förvaring av medicinsk utrustning eller annan last.



Förlängare för att kompensera benlängd

Rekommenderas vid höftasymmetri eller bäckenrotation. Kan justeras upp till 100 mm.