

Netti Kyphotic

Netti Kyphotic är designad för att ge maximal komfort och stabilitet för rullstolsanvändare med kyfos och krum rygg.

Stabil och anpassningsbar ryggdyna för sittsystem


Dynan är särskilt framtagen för personer med kyfos eller krum rygg och är avsedd för användning i rullstolar och sittsystem. En flerlagerkonstruktion i PU med 170 mm sidostöd. Dynan ger stöd längs med hela ryggen och ger plats åt ryggraden.

Klädseln är utformad för att följa kurvaturen, vilket ger stöd och stabilitet samt maximal tryckfördelning. Den har ett högelastiskt textilmaterial i mitten och ett ventilerande tyg på båda sidor för att säkerställa god komfort.

Dynan fästs med kardborrband. Den är 500 mm hög och kan justeras steglöst i höjdlid. Kom ihåg att anpassa rullstolens kardborrband efter den enskilda användaren.

Lättskött


Hållbar, andningsbar, elastisk, lätt att torka och hygienisk.

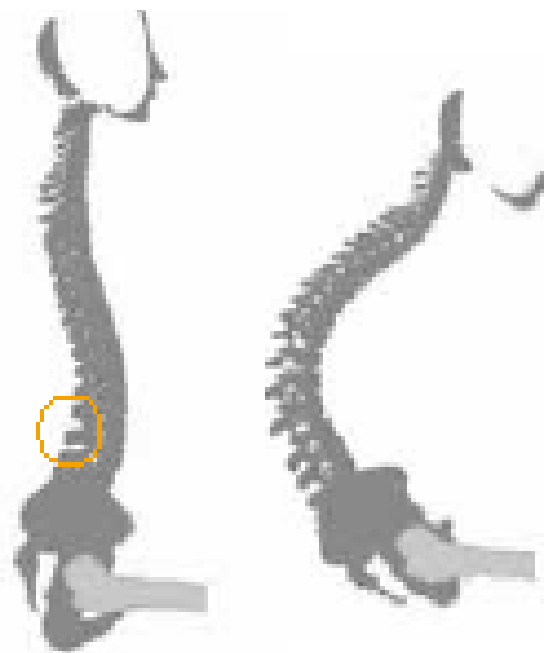



Egenskaper och fördelar:

- Ergonomiskt utformad för att följa krökningen av kyfosen
- Den mellersta delen har en utskuren sektion för att ge maximal avlastning av ryggradens kurva
- Den nedre delen av basen är borttagen så att kudden kan placeras direkt intill och i linje med sittdynan
- Den unika designen säkerställer rörelsefrihet för axlarna
- Flerlayerskärna av skum (PU) med tryckavlastande egenskaper
- Utformad för att ge stöd åt nedre delen av ryggraden och dess kurvatur
- Dynan är avsedd för användning i rullstolar och sittsystem

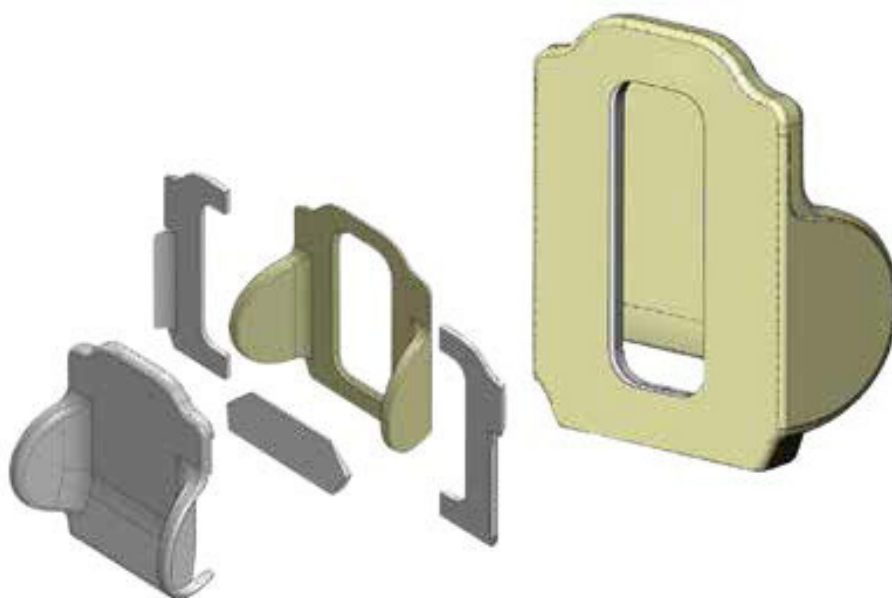

Storlek	Pad komplett	Extra skydd
350 mm	206301	206201
400 mm	206302	206202
450 mm	206303	206203
500 mm	206304	206204