

# Precision® Infant

Identitetsband för prematurer, nyfödda och små barn  
Utskrift med termoskrivare



## Användningsområde

Precision® Infant identitetsband är avsedda att användas i direkttermoskrivare där patientdata tas direkt från journalsystemet för absolut högsta patientsäkerhet. Patientuppgifterna hämtas från en databas och trycket på bandet kan anpassas till användarens egen specifikation och tillgänglig programvara. Skrivaren använder direkttermoteknik och avkänning med "Black bar" vilket gör dem mycket driftsäkra utan trassel och helt utan annan förbrukning än id-bandet.

## Unik lösning för de minsta patienterna

Med Precision® Infant har man lyckats göra ett smalt band (11mm) utan att inkräkta på tryckytan för patientinformationen. Här får man, utan att bredda bandet plats med all patientinformation man behöver inklusive streckkod datamatrix. Lösningen är den lilla "vingen" där informationen trycks.

## Bandlåsning

Bandet låses med en starkt häftande klistermassa/tejp. Efter förslutning går det inte att öppna utan att det tydligt märks på bandet. Klistret är resistent mot alla de mest vanliga vätskorna som förekommer i sjukhusmiljöer.

## Material

Precision® Infant är gjort av polyeten. Termotrycket håller sig skarpt och suddas inte ut över tid. Banden är PVC-fria, ftalatfria samt latexfria.

## Förvaring


Temperatur 15-25°C  
Luftfuktighet 40-50% RH



Beroende på vilket skrivarefabrikat och modell som används finns Precision® Infant med olika spolning, spoldiameter och antal band per rulle. Kontakta oss för detaljerad information.

Banden nedan passar till skrivare PDC-2I

Banden finns att få i fler färger. Kontakta oss för detaljerad information.

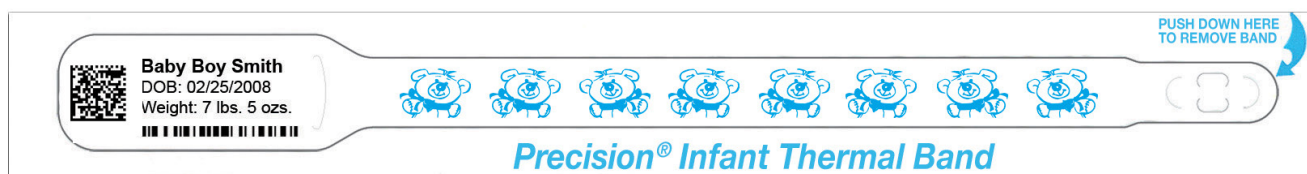

Precision® Infant Thermal Band

Art nr	Beskrivning	Patientgrupp/storlek	Tryckyta för patient-info mm	Rullens inner-/yttre-diameter mm	Band-storl mm	Avd förp	Trpt förp
7701-11-PDL	Precision® Infant, vit	Nyfödd/prematur	38 x 19	38/126	L 178 B 11/19	400 st 2 rullar x 200 band	4 x 400 st
7701-16-PDL	Precision® Infant, röd	Nyfödd/prematur	38 x 19	38/126	L 178 B 11/19	400 st 2 rullar x 200 band	4 x 400 st

Precision® Infant- av Precision Dynamics Corporation registrerat varumärke