

Tube Holder™

Slang- och kabelhållare
Steril, 1-stycksförpackad



Ordning och reda

Tube Holder™ är ett praktiskt hjälpmedel för att hålla ordning på kablar, sladdar och slangar. Enkelt och praktiskt.


Sätts fast med tejp

Tube Holder™ består av två delar: en platta och fästband. Storlek 7,5 x 7,5 cm.

Plattan sätts fast med hjälp av den självhäftande tejpens på undersidan. Fäster bra på alla material. Fästbandet är stadigt men ändå smidigt.

Fästbandet är tillverkat av nylon Velcro® material och plattan består av polyester polyuretan foam.

Steriliseringmetoden är gamma
CE märkt klass I

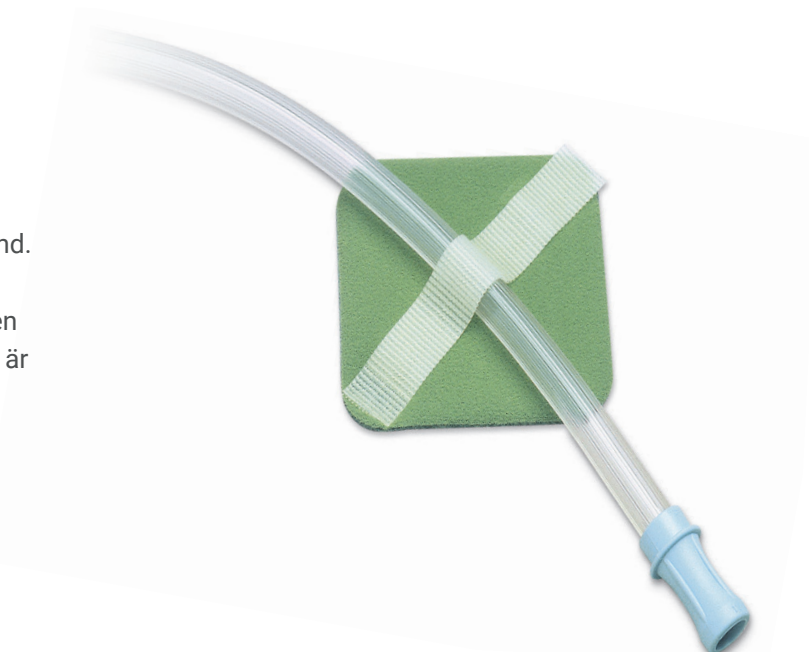


Skapa fast eller rörligt läge

Fästbandet är mycket flexibelt och fäster lätt och säkert mot plattan. Beroende på hur bandet läggs kan man skapa fast eller rörligt läge för t.ex. en slang. Se bruksanvisning. Tube Holder finns både med fast och flyttbart fästband.


Förvaring

Temperatur 15-25°C

Luftfuktighet 40-50% RH

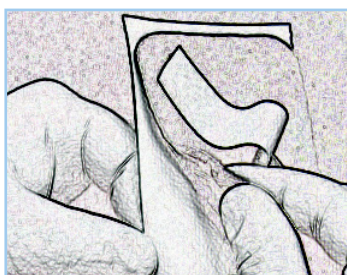


Ta bort skyddspapperet och sätt fast plattan

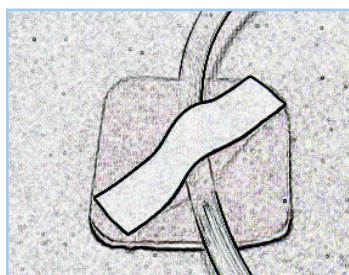

Lägg bandet så här för rörligt läge



För fast läge: Lägg fästbandet runt t.ex. slangens

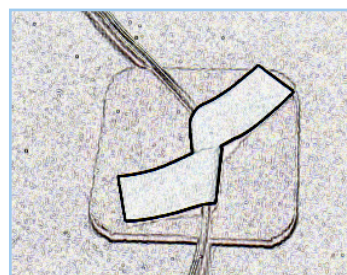

Tryck fast fästbandet

Art nr	Beskrivning	Mått	Avd förp	Trpt förp
31142667	Sug- och diasladdshållare Tube Holder™ 3100 flyttbart band	7,5 x 7,5 cm	25 st	4 x 25 st
31142675	Sug- och diasladdshållare Tube Holder™ 3110 fast band	7,5 x 7,5 cm	25 st	4 x 25 st